

PPH-SET



Included surgical features




CE 0481



Gleichzeitig mit Betätigen des Drehmechanismus, verändern sich die Markierungen auf der optischen Orientierungsskala. Dadurch werden mögliche Fehlbedienungen nahezu reduziert.



Ein Einzigartig gehärteter Schneidring, ermöglicht präzises Schneiden von Gewebe, was von einem lauten Klickgeräusch begleitet wird, sobald das Gewebe komplett durchtrennt wurde. Dies gibt dem Chirurgen einen zusätzlichen Sicherheitshinweis, bezüglich der erfolgreichen Beendigung des Schneidvorgangs.

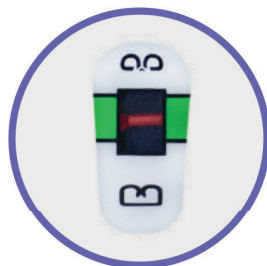

Eine sichtbar skalierte Anzeige ermöglicht es dem Chirurgen, den korrekten Auslösebereich des Instruments (zwischen 0,8 mm und 1,5 mm) zu finden und dadurch Fehler zu vermeiden.



Transparente Abdeckung / Außenhülle der Kartusche, sorgt für eine bessere Visualisierung. Der Chirurg kann wesentlich genauer bestimmen, wie viel des zu entfernenden Gewebes, bereits in die Kartusche eingebracht wurde.

PPH-Set

Article No.	Outside \varnothing	Cutting \varnothing	Staple Amount	Leg Height
PAH32-TF	32 mm	22.2 mm	30	3.8 mm
PAH34-TF	34 mm	24.2 mm	32	3.8 mm
GH-Y-36*	36 mm	28,2 mm	34	3,8 mm

STARR Stapler

Article No.	Outside \varnothing	Cutting \varnothing	Staple Amount	Leg Height
PAH32-TF-ST4.5	32 mm	22.2 mm	30	4.5 mm
PAH34-TF-ST4.5	34 mm	24.2 mm	32	4.5 mm
GH-ST-36*	36 mm	28,2 mm	34	4,5 mm

* Instruments with GH Article No. are supplied with black cover/outer layer